


オットマン型フットマッサージャー DOM-2101

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
 正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあとも
 いつでも見られるように大切に保存してください。



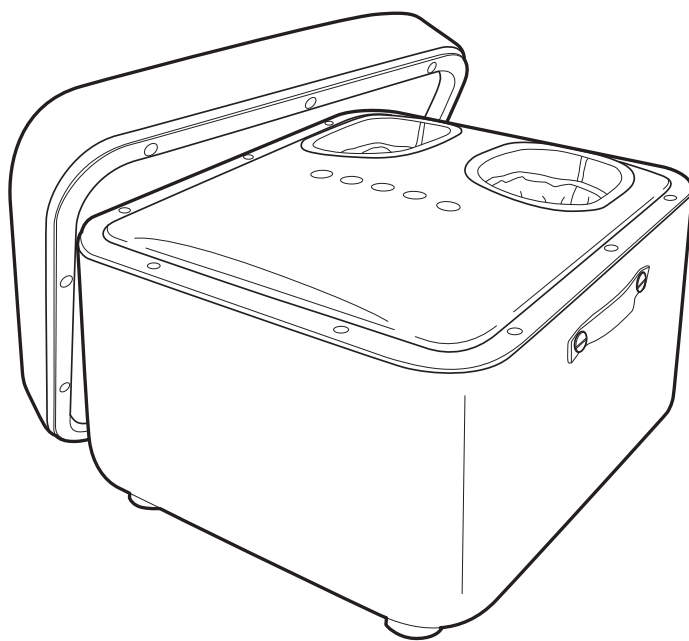

も く じ



安全上のご注意 P.2 ~ P.3	修理・サービスを依頼する前に P.10
各部の名称とはたらき P.4	仕様 P.11
正しい使いかた P.5 ~ P.7	アフターサービスについて 裏表紙
お手入れと保存 P.8 ~ P.9	保証書 裏表紙

安全上のご注意








- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)




図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)







警告

 指示	<p>医師の治療を受けている人や、次のような人は必ず医師とご相談ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人。 ●安静を必要とする人。 ●悪性腫瘍のある人。 ●心臓に障害のある人。 ●熱の高い人(38℃以上・有熱期)。(例:急性炎症症状倦怠(けんたい)感、悪寒、血圧変動などの強い時期。衰弱しているとき)。 ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど急性[疼痛(とうつう)性]疾患の人。 ●けんしよう炎の人。 ●妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。 ●かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人。 ●背骨(脊椎)に異常のある人又は左右に曲がっている人。 ●特に身体に異常を感じているとき。 ●皮膚に創傷のある人。 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。 ●温度感覚喪失が認められる人。 ●使用しても効果が現れない人。 ●その他医療機関で治療中の人。 				
 禁止	<p>次のような人は使用しないでください。 症状を悪化させるおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●医師からマッサージを禁じられている人。 <p>例: 血栓塞栓症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、各種皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)、など。</p>				
 禁止	<p>交流100V以外では使用しない。 火災・感電・故障の原因になります。</p>	 指示	<p>異常時(こげ臭い、発煙など)は電源プラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。</p>	 分解禁止	<p>分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。</p>
	<p>電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。</p>		<p>電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。</p>	 めれ手禁止	<p>ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。</p>
 禁止	<p>電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。</p>	 プラグを抜く	<p>電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したままACアダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。</p>	 水ぬれ禁止	<p>水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。フットカバー以外、洗わない。 ショート・感電の原因になります。</p>
	<p>子供に使用させない。また本体の上で遊ばせない。乗らせない。 けがや故障の原因になります。</p>		<p>使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。</p>	 指示	<p>使用前にはカバーが破れていないかを確認する。また、そのほかの部分にも破れがないか確認する。もし破れがある場合には、どんなに小さな破れでも、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼する。 布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。</p>
	<p>本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。</p>		<p>お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。</p>		


警告

 禁止	<p>電源コードを束ねたままや巻きつけたまま使用しない。 発火や発煙の原因になります。</p>	 禁止	<p>金属や燃えやすいものを近づけない。たばこを吸いながら使用したり、ストーブなどの火気の近くで使用したりしない。 感電やショート・火災の原因になります。</p>	 禁止	<p>改造しない。 発火や異常動作、けがの原因になります。</p>
	<p>素肌や衣服が濡れている状態で使用しない。 けがや感電の原因になります。</p>		<p>布団やこたつの中、毛布をかぶせて使用しない。 内部の温度が上昇し、火災や事故、感電の原因になります。</p>		<p>マッサージ以外の目的に使用しない。 事故やけが、体調不良をおこすことがあります。</p>
	<p>浴室など湿気が多い場所では使用しない。 感電および故障の原因になります。</p>		<p>補助を必要とする人は、安全に責任を負う人の監視または指示がないときは使用しない。</p>		<p>マッサージをする部位にアクセサリ(装身具)を付けたまま使用しない。 けがや感電・事故の原因になります。</p>
	<p>本体に乗って立ったり、勢いよく乗ったりしない。 けがや故障の原因になります。</p>				<p>業務用として使用しない。</p>

注意

 指示	<p>電源プラグを抜くときは電源コードを持ちず必ず電源プラグをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。</p>	 禁止	<p>次のようなときは使用しない。 ・疲労が激しいとき。 ・酒に酔っているとき。 ・湿疹が生じているとき。 ・食前、食後(それぞれ1時間) 体調不良をおこすことがあります。</p>	 禁止	<p>他の治療器具と一緒に使用しない。 事故やけが、体調不良を起こすおそれがあります。</p>
	<p>1回の使用時間は15分以内に、同一箇所への連続使用はさける。 逆効果やけがの原因になります。</p>		<p>直射日光が当たったり、高温になる場所に本体や付属品を置いたりしない。 色あせ、熱による変形、故障の原因になります。</p>		<p>使用中は眠らない。 無意識での使用は、からだへの異常やけがの原因になります。</p>
	<p>使用中、からだに異常があらわれた場合は、ただちに使用をやめて、医師に相談する。 事故やけがの原因になります。</p>		<p>皮膚に直接マッサージしない。 けがや事故の原因になります。</p>		<p>寝る前に使用しない。また貧血、貧血気味の人は使用しない。 寝る前・貧血、貧血気味の人が使用すると、睡眠に悪い影響があることがあります。</p>
	<p>動かなくなったり、異常が感じられたときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く。 感電・漏電・ショートなどによる火災の原因になります。</p>		<p>炎症や傷のあるところに直接使用しない。 炎症や傷の悪化の原因になります。</p>		<p>使用にかかわらず、本機の上での飲食はしない。 感電や故障の原因になります。</p>
	<p>フットカバーのファスナーなどきちんと取り付けてから使用する。 カバーのファスナーが中途半端な取り付け状態だと、けがの原因になります。</p>		<p>この機器は、表面が熱くなるため、熱に敏感でない人、自分で意思表示ができない人、自分で操作できない人には、使用させない。 低温やけどや事故、けがの原因になります。</p>		<p>車内で使用しない。 事故・故障の原因になります。</p>
	<p>異常に熱を持ったり、異音がするときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く。 内部の故障、火災の原因になります。</p>		<p>ACアダプターは本品に付属しているもの以外は使わない。 故障の原因になります。</p>		<p>落としたり、強い衝撃を与えない。 感電やショート、事故の原因になります。</p>
 禁止	<p>毎回使用開始時は、必ず「弱」(弱い刺激)から使用する。 けがの原因となります。</p>	 禁止	<p>電源コードを、ねじれたまま使用しない。保存しない。 故障の原因になります。使用する前にはねじれをなくしてから使用してください。</p>	 プラグを抜く	<p>停電のときには、ただちに電源プラグをコンセントから抜く。 停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。</p>		<p>マッサージ中に電源プラグをコンセントから抜かない。 故障の原因になります。</p>		


各部の名称とはたらき

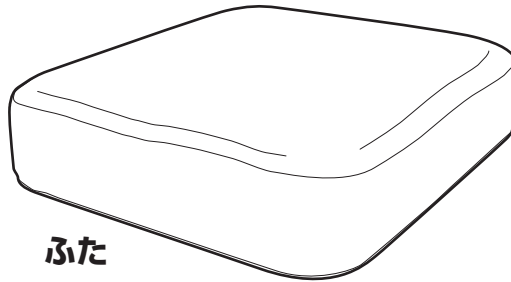

ふた



フットカバー
(出荷時取付済)

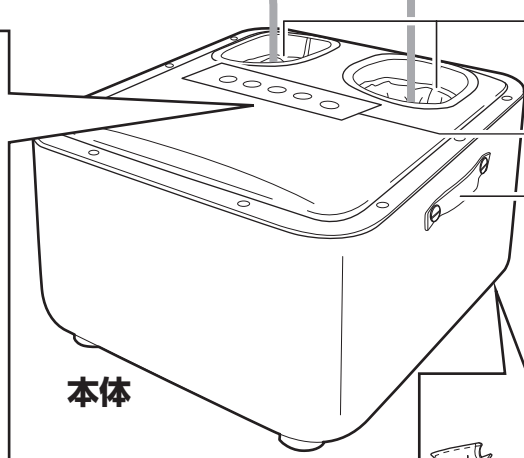


本体

足入れ部

操作部

取っ手

DCジャック

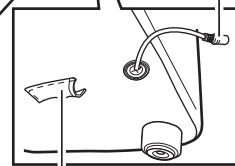

収納ポケット
使用しないときにDCジャックの先端を収納しておきます。

操作部

Ⓐ 電源ボタン

電源の入/切をします

Ⓑ モードボタン

フットマッサージのモードを変更することができます。

Ⓒ 強さボタン

押すたびにエアの強さが変わります

Ⓓ 温感ボタン

内部中央にある、温感もみ玉のヒーターの入/切をします

Ⓔ 緊急停止ボタン

すべての機能を停止します

MOMILUX®



電源

A



モード

B



強さ

C



温感

D




緊急停止

E

付属品

ACアダプター・電源コード

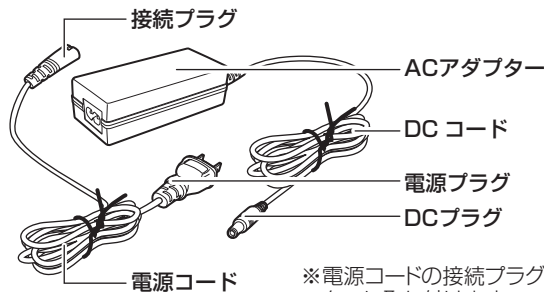

接続プラグ

ACアダプター

DCコード

電源プラグ

DCプラグ

電源コード

※電源コードの接続プラグをACアダプターに取り付けます。


正しい使いかた

効果、効能

- ・あんま、マッサージの代用
 - ・血行促進
 - ・疲労回復
 - ・神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげる
- ・筋肉の疲れをとる
- ・コリをほぐす

使用目的


- ・一般家庭で使用するこ

 警告	<ul style="list-style-type: none">・フットカバーをはずして使用しない。・使用前には、必ずフットカバーが破れていないか確認する。また、その他の部分にも破れがないか確認する。・もし、破れなどがある場合には、どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、絶対に使用しない。
--	---

使用前の準備

1. 揺れや重みに強い、水平な床に設置する

安定した水平な床に設置してください。


 注意	テレビ、ラジオなどから 2m 以上はなして設置する。 雑音の原因になる場合があります。
--	--

2. ふたをはずし、フットカバーが確実に装着され、破れなどが無いことを確認する

破れを発見したときは絶対に使用しないでください。

3. 電源コードの接続プラグをACアダプターの接続ジャックにしっかりと差し込む

4. ACアダプターのDCプラグを本体のDCジャックに接続する


 注意	ACアダプターは、コンセントの奥まで、DCプラグは本体側のDCジャックの奥までしっかりと差し込む。
--	---

5. ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込む

電源コードは、束ねたまま・巻きつけたまま使用しないでください。

6. ◎電源ボタン、強さボタン、温感ボタン、緊急停止ボタン、タイマーが正常に作動するか確認する

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、機器が正常かつ安全に動作することを確認してください。

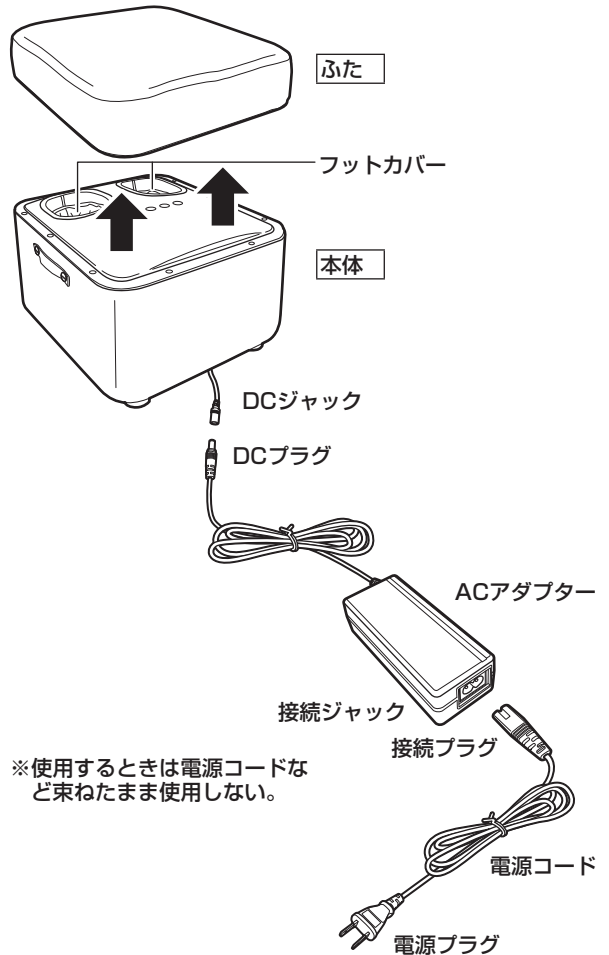

正しい使いかた（つづき）

使いかた


1. 本体をソファーや椅子の近くに設置する

ソファーや椅子に座って使用します。本機のみでは使用することができません。

本体と比べて低すぎるソファー・椅子は使用できないことがあります。

2. 電源を切った状態で、本体のフットマッサージャー部分に足を入れる

マッサージしたい部位にあわせて、足の位置を前後させてください。

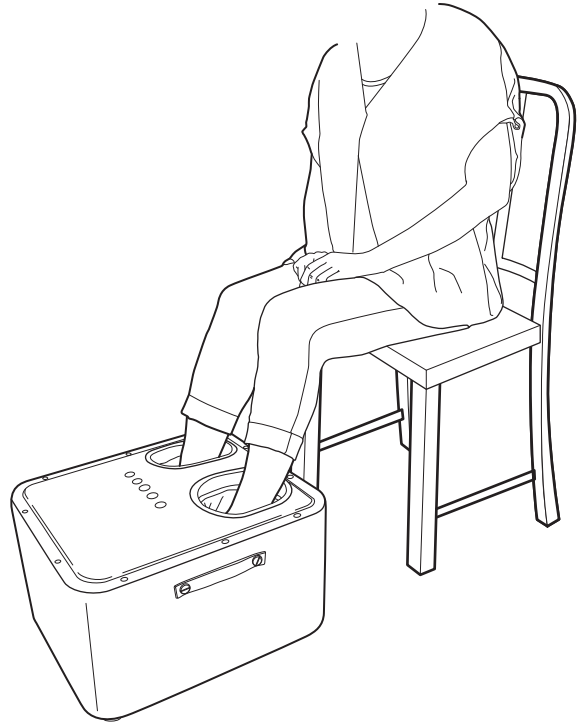

⚠️ 注意

- ズボンやくつ下をはいて使用する。
- ソファーや椅子に座って使用する。全体重を本製品にかけると、故障の原因になります。マッサージ中は立ち上がらないでください。
- 椅子はキャスターなどで動かないものを使用する。

操作方法

1. 電源ボタンを押してマッサージを開始する

⚠️ 注意


- 1回の使用時間は15分以内にする。逆効果やけがの原因になります。
- 足以外で使用しない。本製品は足専用です。本来の使いかた以外の使用はしないでください。



2. モードボタンを押して、マッサージのモードを設定する

モードボタンを押すことで、モードが変わり、マッサージのパターンが変化します。

モード1→モード2→モード3→モード1→...

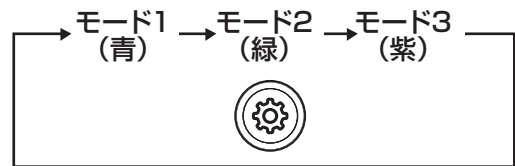

モード1 (青) もみほぐし

足裏ローラーとエアバック加圧によるバランスマッサージをします

モード2 (緑) しぼりあげ

足裏ローラーでかかとつま先を交互に刺激します


モード3 (紫) あしうら

足の甲側からエアバック加圧で足全体を押しマッサージをします。

⚠️ 注意

禁止項目

- 内部の機器を破損させてしまうため、本機に足を入れたまま立ち上がったりしない。
- ふたを取り付けていない本体の上面(操作部まわりなど)は荷重に弱いので、ふたを取り付けずに足をのせたり、座ったりしない。破損・故障の原因になります。

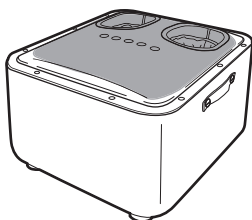

操作部

㊤電源ボタン A

電源の入/切をします

㊦モードボタン B

フットマッサージのモードを変更することができます。

㊨強さボタン C

押すたびにエアークッションの強さが変わります

㊩温感ボタン D

内部のマッサージ部分のヒーターの入/切をします

㊪緊急停止ボタン E

すべての機能を停止します

MOMILUX®



3. ㊨強さボタンを押して、エアークッションの強さを調節する


㊨強さボタンを押すことで、エアークッションの強さを調節することができます。必ず「弱」から使用し、慣れてきてから順に強さを調節します。

㊨強さボタンを押すたびに、ボタンの色が変わり強さが変わります。

※足の大きさ、形状は個人差があります。㊨強さボタンで調節して、自分に合った適切な強さでマッサージしてください。

自動オフタイマー


使いすぎや切り忘れを防止するためタイマーにより約15分で自動停止します(ヒーターも停止します)。

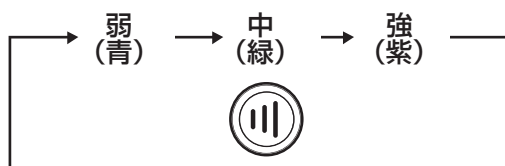

4. ㊩温感ボタンを押して、ヒーターの「入」「切」を選択する

・ヒーターが「入」のときは、温感ランプが点灯し、温感もみ玉が「入」になります。

※ヒーターは温熱治療を目的としたものではありません。

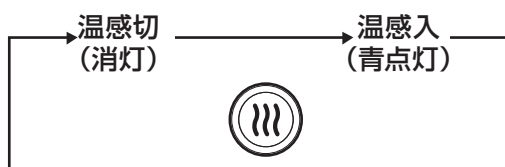

5. ㊤電源ボタンを押して動作を停止させ、ACアダプターをコンセントから抜く

※㊪緊急停止ボタンを押すとすべての機能が強制的に終了します。エアバックは解放状態、ヒーターは切状態になります。

※使いすぎや切り忘れを防止するため、タイマーにより約15分で自動停止します。

・使用後は、電源コードのねじれなどを元に戻してから保存してください。

⚠警告

- ・使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。
- ・電源プラグ持ってコンセントから抜く。
コードを持って引き抜いたりすると接続部に無理な力がかかり、絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。
- ・電源コードを巻きつけたまま使用しない。
発煙・発火の原因になります。

お手入れと保存



お手入れの際は、必ず電源コードをコンセントから抜き、温感もみ玉使用のときは本体が冷めたことを確認する。感電やけが、やけどの原因になります。

お願い

- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ・化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きにしたがってください。
- ・本体に直接、水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

本体のお手入れ

フットカバーのみ取りはずして洗うことができます。※

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。強くこすらないでください。傷つきや布が破損する原因になります。

※洗濯タグに記載されている洗濯マークに従ってください。

オットマンとしての使用・保存

1. 使用後、本体のDCジャックからACアダプターを取りはずし、DCジャック部分を本体底面にある収納ポケットに入れる

DCジャック部分を収納ポケットに入れると、DCジャック部分がじゃまにならずに、保存できます。



- ・取りはずした AC アダプターはコードを束ねて、本体内フットマッサージャー部分に入れておくことができます。

2. 常時本体にふたを取り付けておき、必要なときに、本体を移動させて、足をのせて使用する

安定した水平な床に設置してください。取っ手を使用して移動させてください。

長期間使用しないときは、ホコリが付かないようにビニールなどをかけて保存してください。

DCジャック

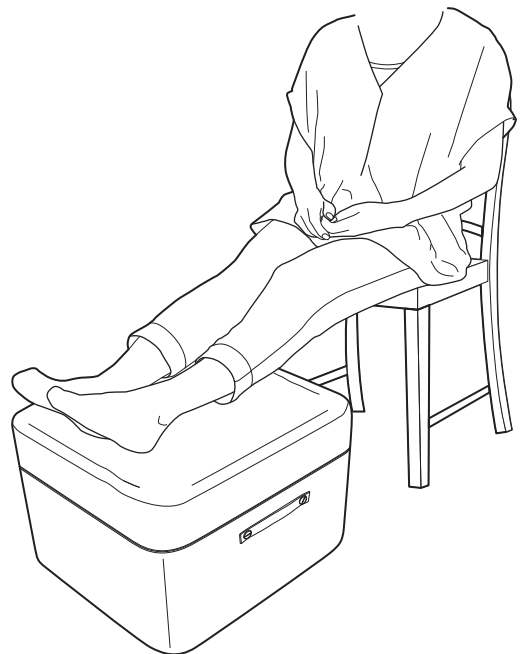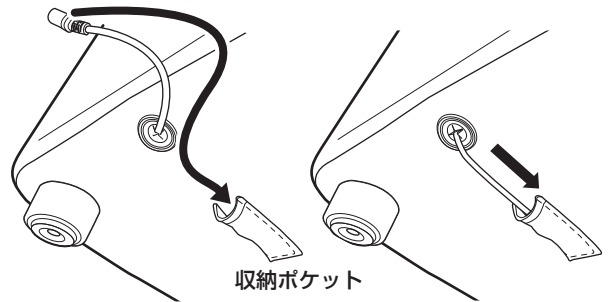

移動させるときに引きずらないようにする。床面や畳など傷つける原因になります。

フットカバーのお手入れ


フットカバーの取りはずし

本体にある、ファスナーを動かすと、本体の凹み部分（左右計2枚）のフットカバーのみ取りはずすことができます。洗濯タグに記載されている洗濯マークに従って洗濯することができます。

フットカバーの取り付け

フットカバーは左右別々で（右上の図参照）ファスナーのスライダーの付いている側、ファスナーのスライダーの付いていない側があります。

1. フットカバーの底面と本体側には対応する面ファスナーが取り付けられており、それらを組み合わせ取り付ける。

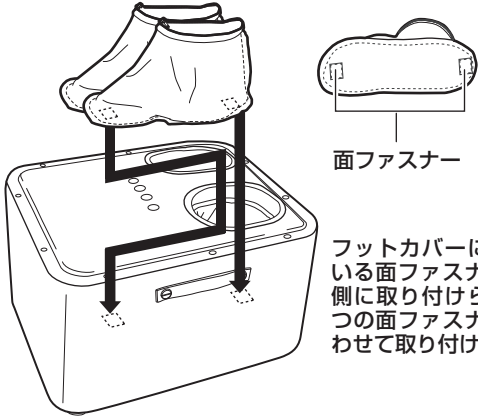


- 2・3. 本体とフットカバーのスライダーを組み合わせる。
- 4・5. スライダーを一周させる。

保存のしかた


次回の使用に支障のないように清掃し、ホコリが付かないようにビニール袋などに入れて、湿気の少ないところに保存してください。

廃棄のしかた


- ・本機は一般ゴミでは捨てるできません。破棄するときは、お住まいの自治体（都道府県、市区町村）の指示に従ってください。

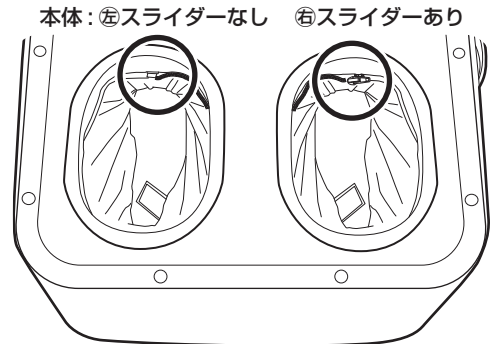


2. スライダー組み合わせ前

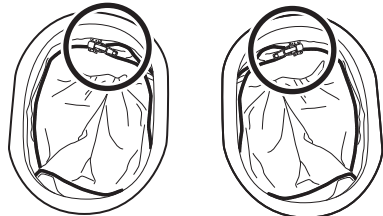

3. スライダー組み合わせ

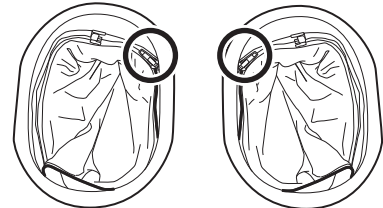

4. スライダー半周移動

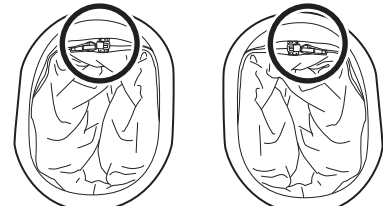

5. スライダー一周／取付完了

修理・サービスを依頼する前に

⚠警告 修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。

「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	・電源プラグがコンセントに差し込まれていない	電源プラグをしっかりコンセントに差し込む
	・電源コードの接続プラグがACアダプターに差し込まれていない	接続プラグをしっかりACアダプターに差し込む
	・ACアダプターのDCプラグが本体のDCジャックに差し込まれていない	DCプラグをしっかりDCジャックに差し込む
マッサージ運転中に停止した	・タイマーによって約15分で自動で停止します	1回の使用は15分以内とし、同一箇所への連続の使用は避けてください
エアーが抜けない	・運転が継続している	緊急停止ボタンを押して運転を止める。どうしてもエアーが抜けないときは、ACアダプターを抜いてみる
音がする、音が大きい	・構造上、音が発生するものなので、故障ではありません	そのままご使用ください

長年ご使用の家庭用電気マッサージ器はよく点検を

このような症状はありませんか？

- ・電源コードや電源プラグ、ACアダプターが異常に熱い。
- ・コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店またはドゥシヤお客様相談室に点検をご相談ください。

仕 様

仕 様

類 別	機械器具77 バイブレーター
医療機器分類	管理医療機器
一般名称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000)
販 売 名	オットマン型フットマッサージャー
型 番	DOM-2101
医療機器認証番号	302AGBZX00130000
使用目的または効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用する。こと。
電気定格	AC100V 50/60Hz 50W
定格消費電力	DC24V 50W (ヒーター15W)
電源コード長さ	約3.0 m
タイマー	15分 自動OFF
外形寸法	幅 約 38.0 × 奥行 44.0 × 高さ 34.0 cm
質 量	約 8.9 kg (ACアダプター含む)
対象足のサイズ	27cm 以下
材 質	本体：ABS樹脂、PP樹脂 生地：ポリエステル 取っ手：合成皮革
エア圧力	75.84 KPa (±10%)
ヒーター最高温度	約 40 °C
付 属 品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書・保証書
製造販売元	株式会社ドウシシャ 東京都品川区東大井1-8-10
製造業者	XIAMEN COMFORT SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD
原 産 国	中国

- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

MOMiLUX

操作方法や機能説明などをホームページで公開中



<http://momilux.jp/index.html>

製品についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

☎ **0120-104-481**

【受付時間】 9:00～17:00 (祝日以外の月～金曜日)

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。


商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html>



ドウシシャのパーツ購入は

ドウシシャマルシェ 

DOSHISHA Marché
ONLINE STORE 公式オンラインストアで
<https://www.doshisha-marche.jp/>



こちらの
QRコードを
読み込んで
ください